

BARRIER FREE 可搬型階段昇降機

カタログ管理番号

F14-09

ISO 9001  
認証  
対象商品

ステアチェア<sup>®</sup> STAIR  
CHAIR  
SC-5-1

SUNVA

エレベーターを利用できないところでの階段移動に…  
災害時の避難にも利用できます

◀ 階段はバッテリー走行

▼ 踊り場では手動で旋回



可搬型階段昇降機は  
設置工事不要

夢のあるユニークなアイデア製品を創り出す

株式会社サンワ

# 安全性と操作性に優れたクローラータイプ

## 安全性

- スイッチから指を離せば電磁ブレーキの働きでその場で停止 下降する心配がありません
- 特殊設計のゴムクローラーが階段をしっかりとグリップします
- 胸部・腹部・脚部固定ベルトが搭乗者の転落を防ぎます

## 操作性・管理

- 平地は 4 個の車輪で軽く手押し走行ができます
- バッテリーは補水・液モレのないメンテナンスフリーバッテリーを採用
- バッテリーパックはワンタッチで交換できます

## 収納・その他

- ワンタッチで折りたたみができ 収納スペースをとりません
- 常時充電式充電器を標準装備
- ホコリ対策用に車体カバーを標準装備



### ● 介護保険レンタルの場合

#### 操作者の条件

- 年齢：原則16才以上70才以下である
- 病歴：発作性の病気を持っていないこと
- 身長：原則150cm以上
- 体重：原則45kg以上


- 平衡感覚：階段を後ろ向きに上ることができる
- 四肢の状況：両手・両足に不自由がないこと
- 聴覚・視覚：特に聴覚・視覚に問題がないこと

#### その他

- 利用者の条件：特になし
- 禁止事項：▲本製品は操作講習を受けていない方は、操作できません。
- 講習の概要：操作講習は貸与事業者が行いますが、受講できる方には条件があります。

### ● 許容階段寸法

単位:mm

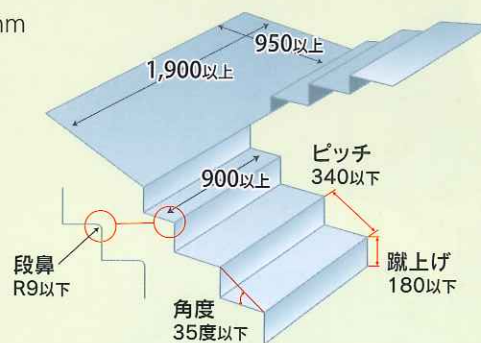

踊り場が上記寸法以上であれば使用可能です。  
※濡れたりしてすべりやすい階段では使用できません。

### ● 仕様

名称	ステアチェア	
型式	SC-5-1	
機体寸法	全長 (mm)	1,292 (収納時 1,085)
	全幅 (mm)	413 (収納時 413)
	全高 (mm)	929 (収納時 498)
最大荷重 (kg)	130 / (1名)	
重量 (kg)	48 (バッテリーパック含む)	
モーター / 出力	DC12V / 210W (30分定格)	
バッテリー	12V-17Ah	
使用時間	約 30分 / 一充電当り	
速度	階段上昇	約 20段 (6.0m) 分 / 最大体重時
	階段下降	約 34段 (10.2m) 分 / 最大体重時
最大階段角度	35°	
制御方式	駐車制動(電磁ブレーキ)	
標準装備品	常時充電式充電器・車体カバー	

この仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

使用環境の条件	階段傾斜角度	35度以下
	段鼻間の距離	340mm 以下
	段鼻 R	R9mm 以下
	蹴上寸法	180mm 以下
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ らせん階段・曲がり階段でないこと</li> <li>■ 段鼻に欠けがないこと</li> <li>■ すべり止めモールがある場合 確実に固定されていること</li> <li>■ 濡れて滑りやすい状態や油脂が付着・凍結した階段では使用しないこと</li> </ul>	

\*本製品は操作講習を受けていない方は操作できません。

# 株式会社サンワ

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>  
E-mail ▶ [sangyo@sunwa-jp.co.jp](mailto:sangyo@sunwa-jp.co.jp)



- 本 社 営 業 部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
- 西日本営業所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構2-126
- 工 場 / 狭山・仙台
- 本 社 / 東京

TEL.04-2954-6611 (代) FAX.04-2954-6617  
TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006